


Connector Set

for RUCK® ROOM move/light

Instructions for Use

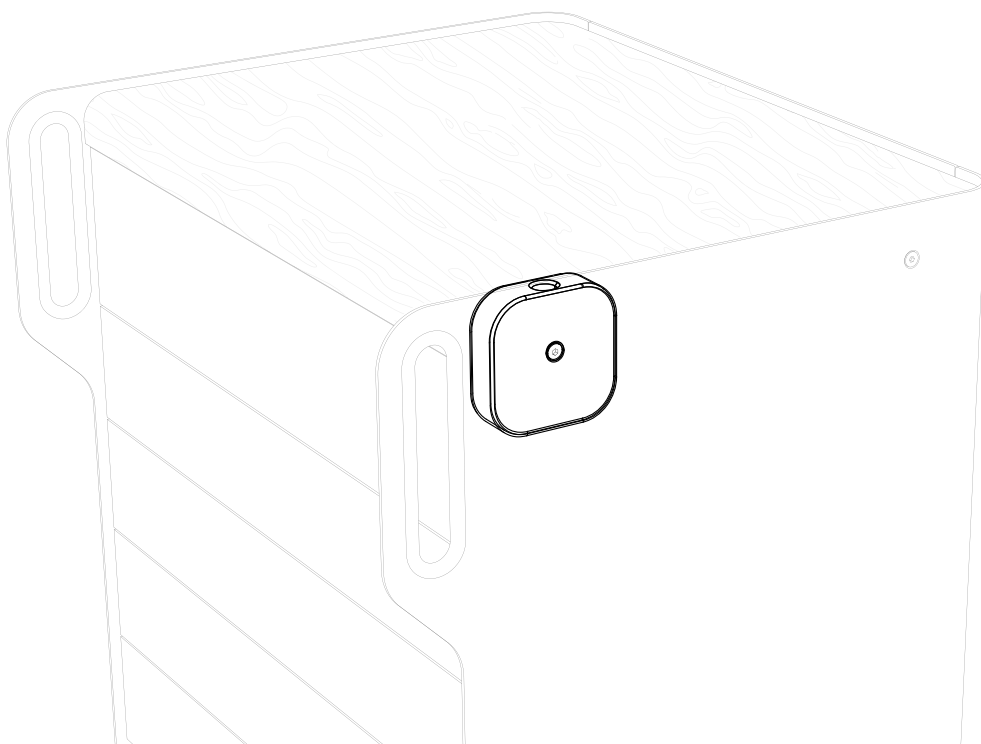

Item no.
1092801

RUCK® Connector Set for RUCK® ROOM move/light

- » Diese Gebrauchsanweisung können Sie in weiteren Sprachen unter nachfolgendem Link herunterladen oder telefonisch anfordern.
- » Tämän käyttöohjeen voitte ladata useilla eri kielillä seuraavasta linkistä tai pyytää tietoa puhelimitse.
- » Puede descargar este manual en diferentes idiomas en el siguiente enlace o bien solicitarlo por teléfono.
- » Instrukcje te mogą być pobierane w innych językach pod poniższym linkiem lub telefonicznie
- » Tento návod je také k dispozici v jiných jazycích. Použijte prosím následující odkaz ke stažení návodu nebo si je vyžádejte telefonicky.
- » Šo lietošanas instrukciju citās valodās iespējams lejuplādēt zemāk norādītajā saitē vai pieprasīt telefoniski.
- » This manual is also available in other languages. Please use the following link to download the manual or request it on the phone.
- » Questo manuale è disponibile anche in altre lingua. Lo si può scaricare utilizzando il seguente link o richiederlo per telefono.
- » 此說明書另有提供其他國家語言，請點擊此連結下載檔案，或透過電話詢問下載亦可。
- » Navodila za uporabo lahko v številnih jezikih pridobite na sledeči povezavi ali naročite prek telefona
- » Acest manual este disponibil si in alte versiuni de limba. Accesati link-ul urmator pentru a descarca manualul sau il puteti solicita telefonic.
- » Вы можете загрузить руководства по эксплуатации на других языках кликнув на ссылку или запросив по телефону.
- » Τis οδηγίες χρήσεως μπορείτε να τις βρείτε και σε άλλες γλώσσες, πατώντας στο παρακάτω link για να τις κατεβάσετε ή να τις ζητήσετε τηλεφωνικώς.
- » U kunt de gebruiksaanwijzing in diverse talen downloaden onder de volgende link. Ook kunt u deze telefonisch aanvragen.
- » Ce manuel d'utilisation est disponible aussi en autre langues. Veuillez utiliser le lien suivant pour le télécharger ou demandez-le par téléphone.
- » Bu kullanım kilavuzunu farklı dillerdede aşağıdaki bağlantıdan indirebilir yada telefon ile istiyebilirsiniz.
- » Atsiisiškite instrukcija lietuvių kalbą paspaudę šią nuorodą, arba paskambinę telefonu.
- » A használati útmutató magyar nyelven a következő linkről tudja tölteni, vagy kérheti telefonon.
- » פולטב ותוא שקבל או אבה קניבל תופסו תופשב חלעפהה תוארוה תא דירוחל לכות.
- » 여러 언어로 된 본 사용설명서를 다음 링크에서 다운로드하시거나 전화로 요청하실 수 있습니다.
- » Hægt er að sækja þessar notkunarléiðbeiningar á öðrum tungumálum með eftirfarandi tengli eða panta þær símeiðis
- » Ezen kezelési útmutató további nyelveken a következő linken keresztül tölthető le, vagy telefonon megkérhető
- » この取扱説明書はその他の言語でも以下のリンクでダウンロードしていただくことが可能です。またはお電話でお問い合わせいただければご案内申し上げます。
- » Denne brugsanvisning kan du downloade på flere sprog på efterfølgende link eller bestille telefonisk
- » Denna bruksanvisning på andra språk kan du antingen ladda ned från följande länk eller beställa på telefon
- » Цю інструкцію по експлуатації на інших мовах ви можете завантажити за нижчеказаним посиланням на сайт або запросити по телефону

1. hellmut-ruck.de
2. Search item: "1092801"
3. Downloads

| |
|-------------------------|
| https://hellmut-ruck.de |
| 1092801 |

| |
|--|
| Downloads |
| > Instructions for use |

Copyright

© 2023 HELLMUT RUCK GmbH. Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. This document must not be copied, edited, reproduced or translated without the prior, written permission of HELLMUT RUCK GmbH.

Contents

Abbreviations and symbols 4

Declaration relating to these instructions for use 4

Scope of delivery..... 5

Video assembly instructions..... 6

Assembly instructions 7

Matching accessories 20

Spare parts..... 21

Disposal 21

Warranty 22

Abbreviations and symbols



This symbol identifies a potential point of danger for people or for the device itself. It must be taken note of.




This symbol identifies useful advice. Additional information about the product and how to use it is provided here.

Declaration relating to these instructions for use

Hellmut Ruck GmbH reserves all rights to modify and supplement these instructions for use. Hellmut Ruck GmbH has taken great care to keep these instructions free of inaccuracies and omissions. Please contact us if you find mistakes or inaccuracies. However, Hellmut Ruck GmbH assumes no liability for mistakes in these instructions for use or consequential damage resulting from the provision of these instructions for use or their application when using the product.

These instructions for use must not be disseminated or supplemented without the express approval of Hellmut Ruck GmbH.

Scope of delivery

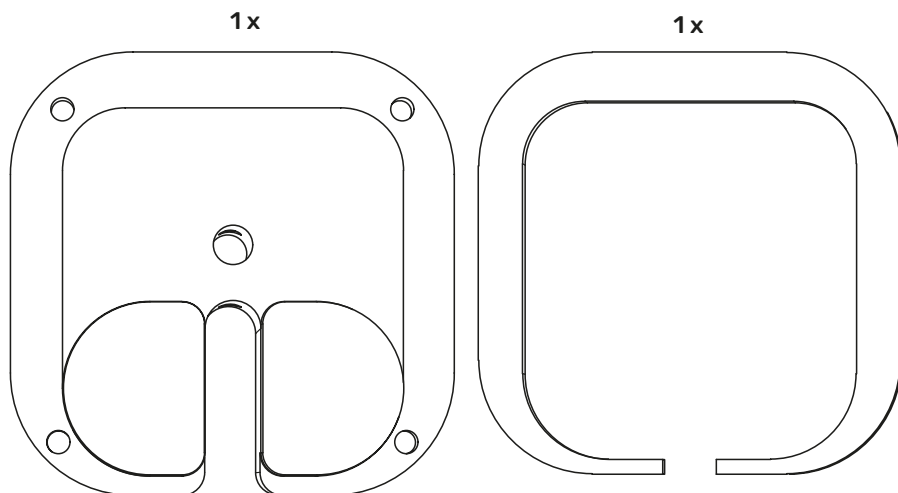


1x 1201501, spacer bush for LUXO




1x 1201502, spacer bush for Daylight iQ

1x 9692901

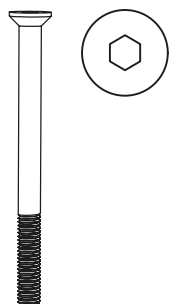


1x Allen key, size 4 mm

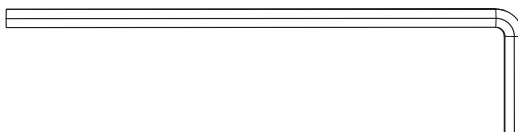

Video assembly instructions




For detailed instructions on how to install the Connector Set for RUCK® ROOM light/move, find the video by scanning the QR code or by typing the following link into your browser.
<https://vimeo.com/372833211>

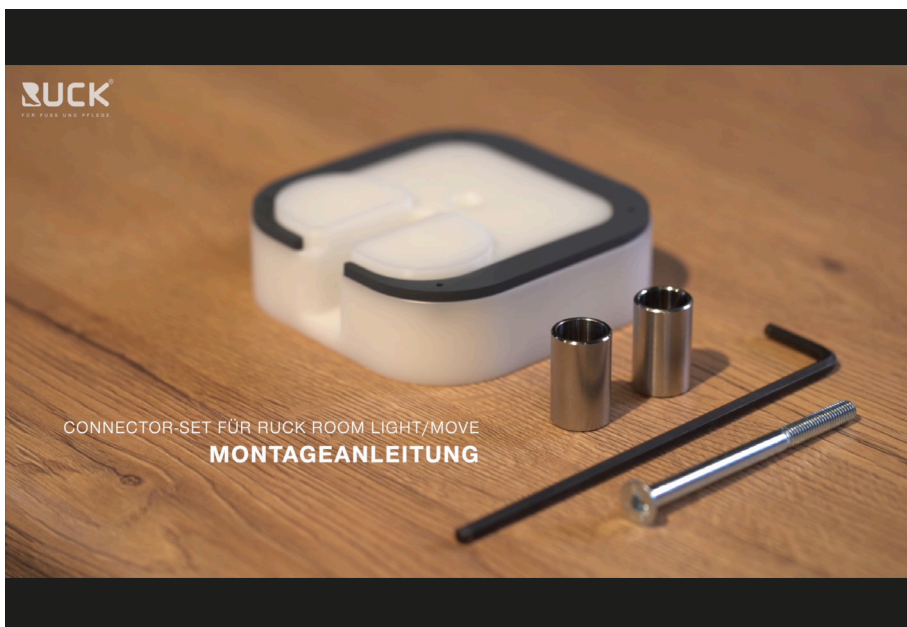


Assembly instructions


①

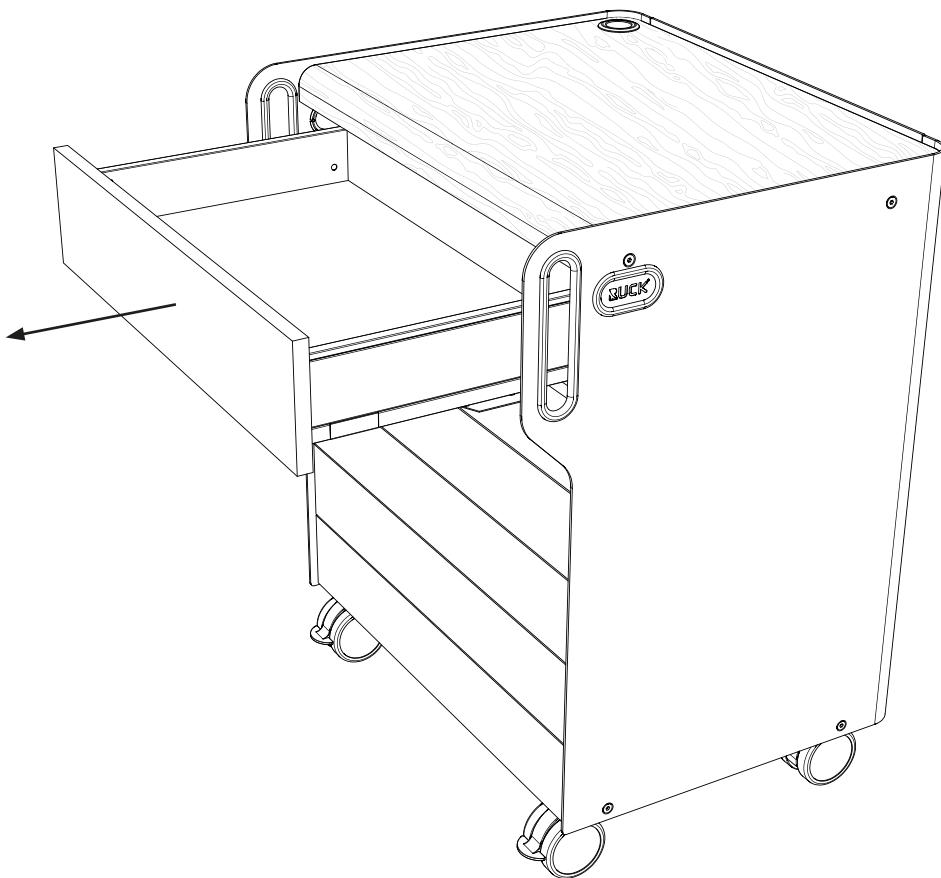


②

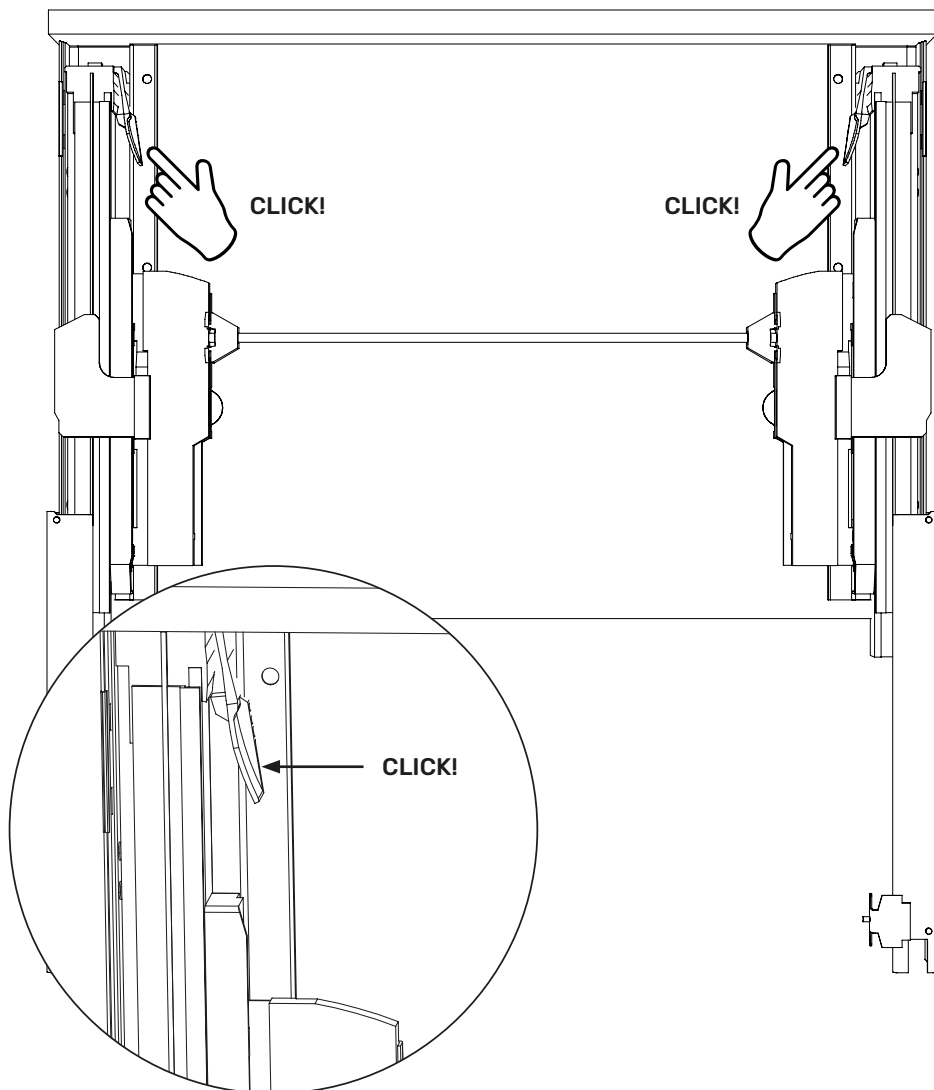


3

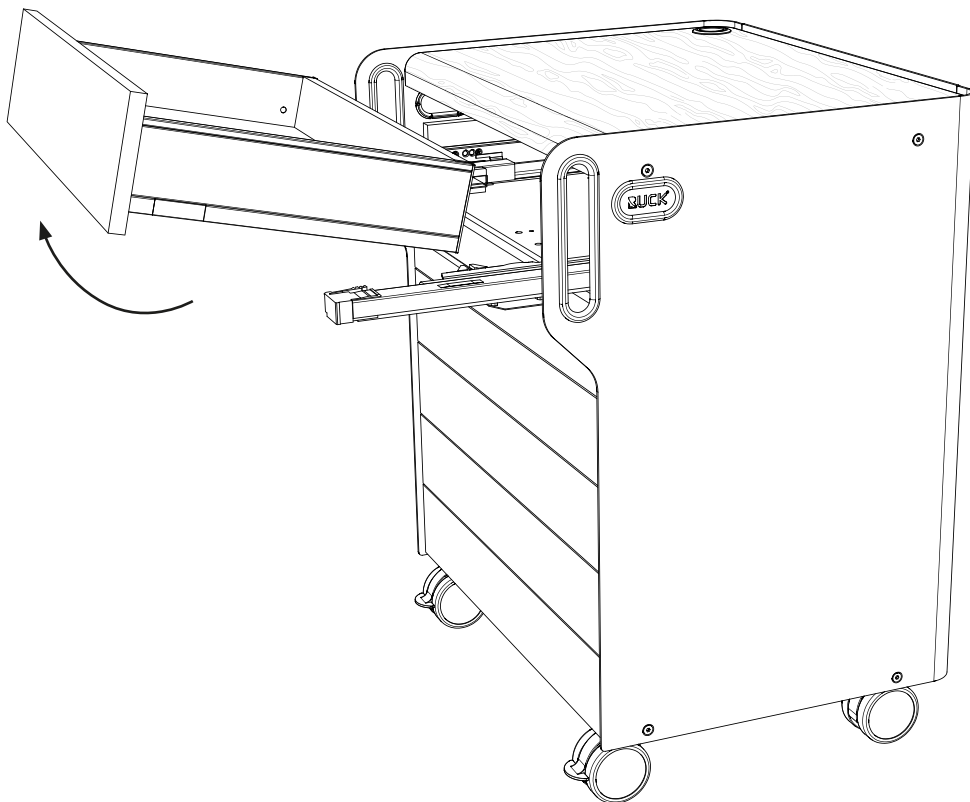


4

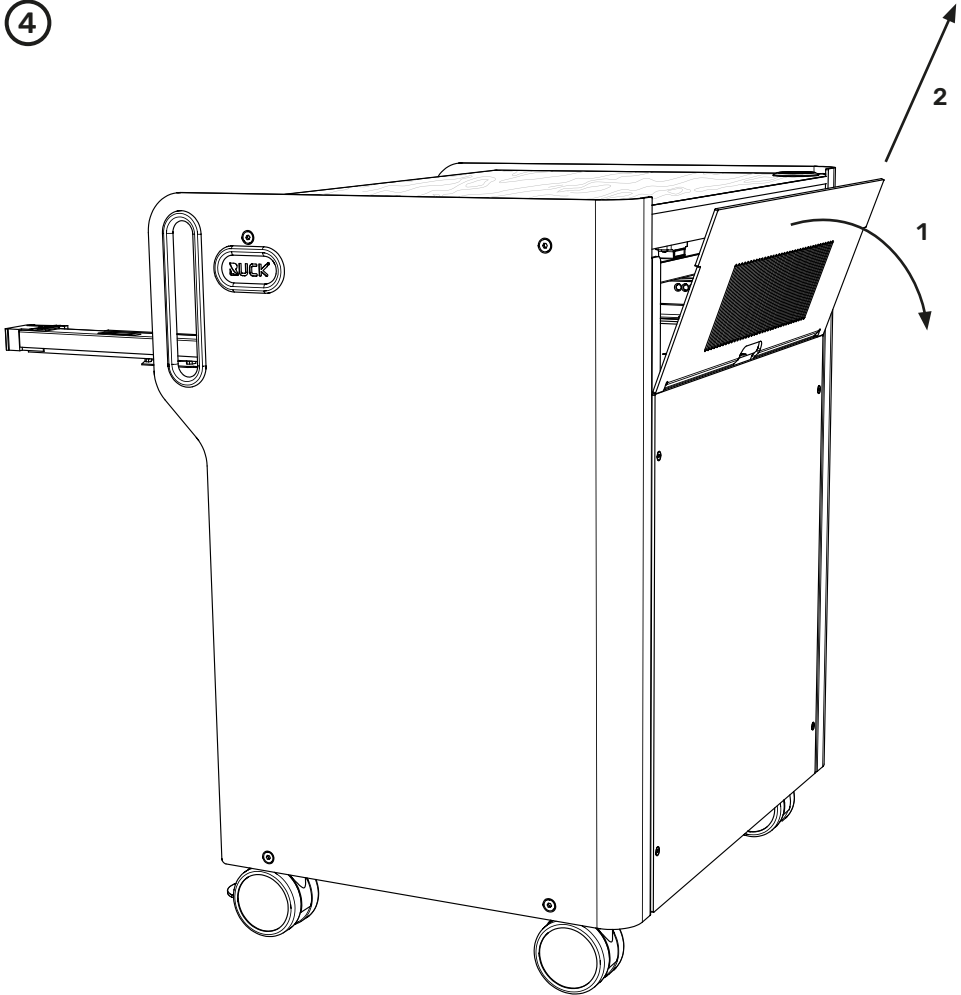


5

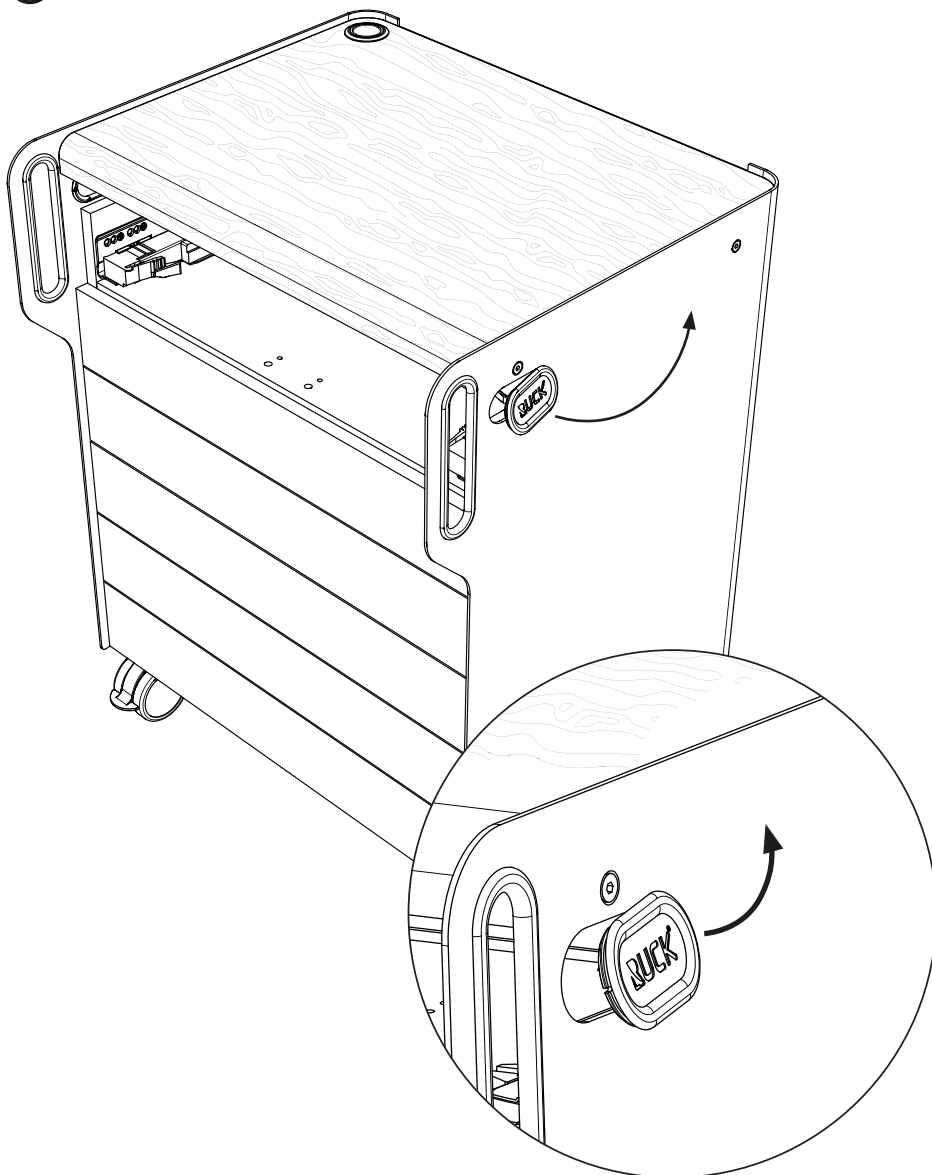


6

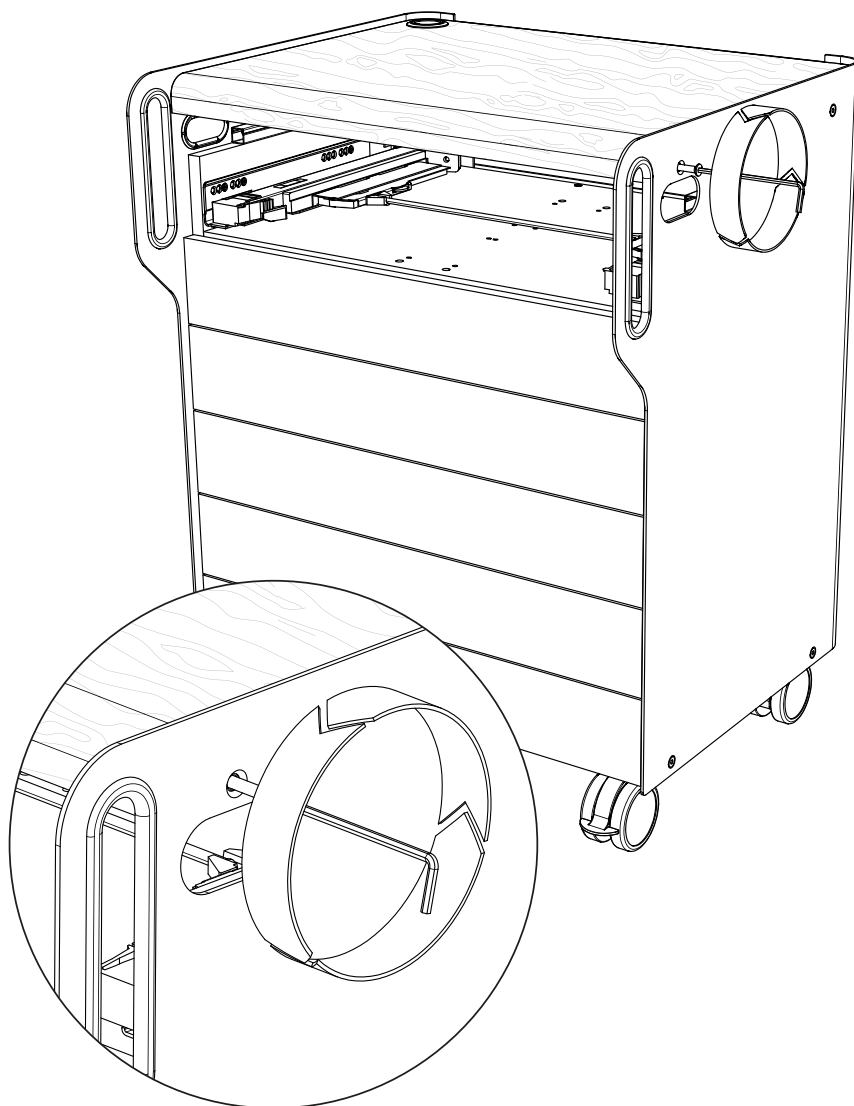


7

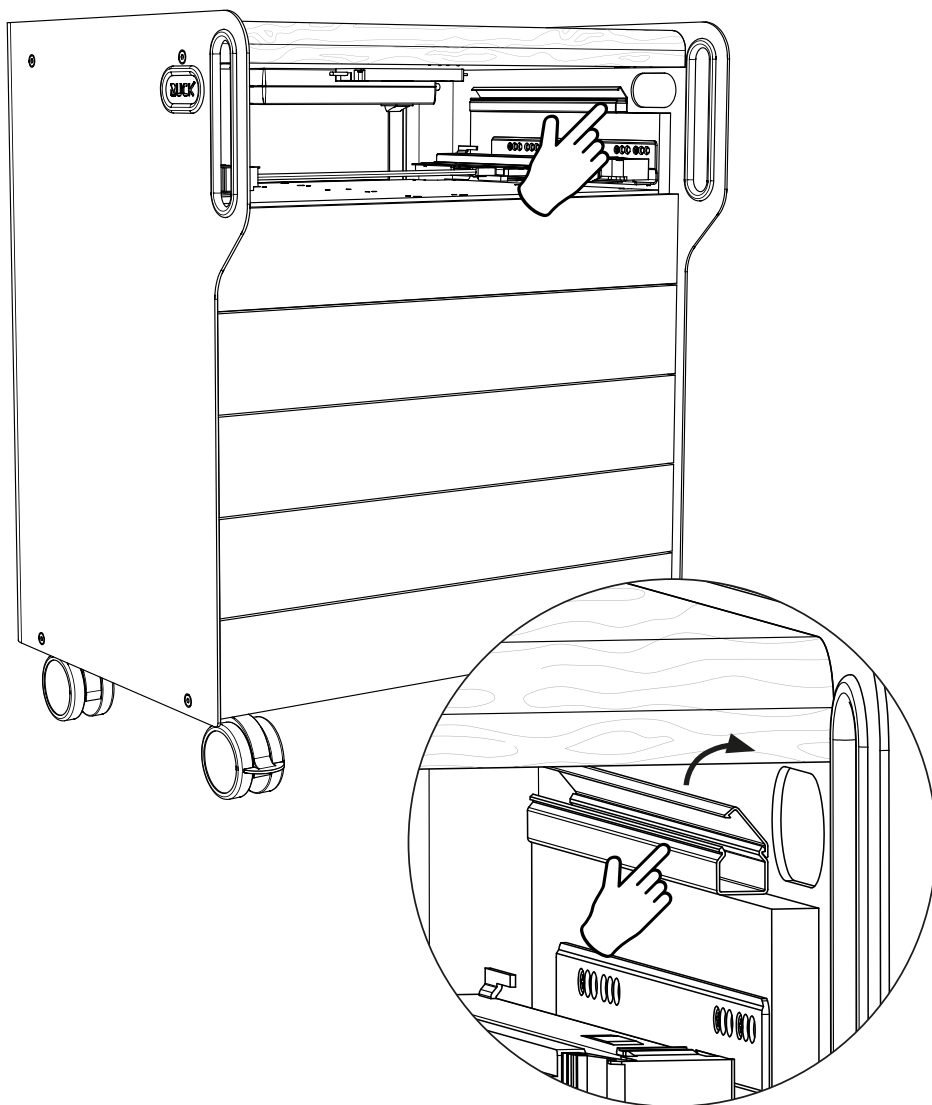


8

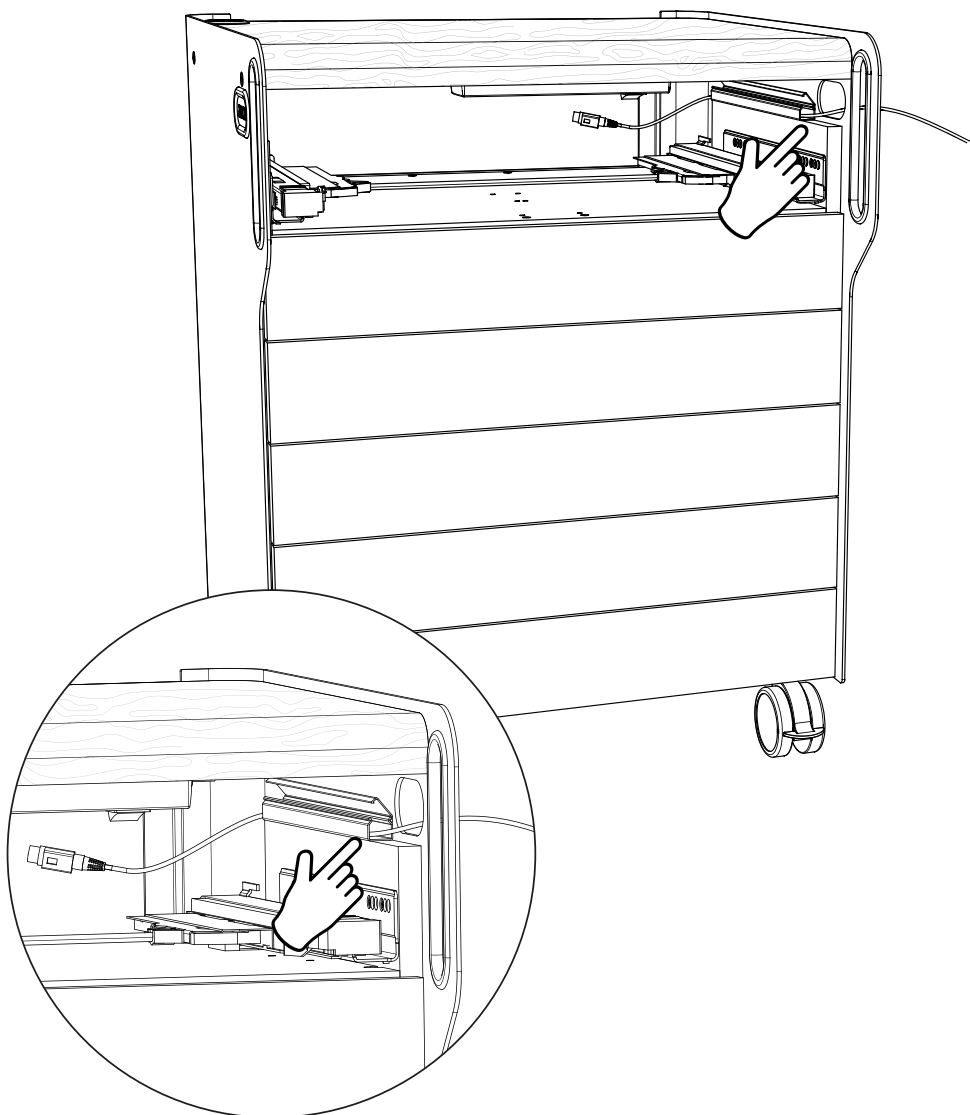


9

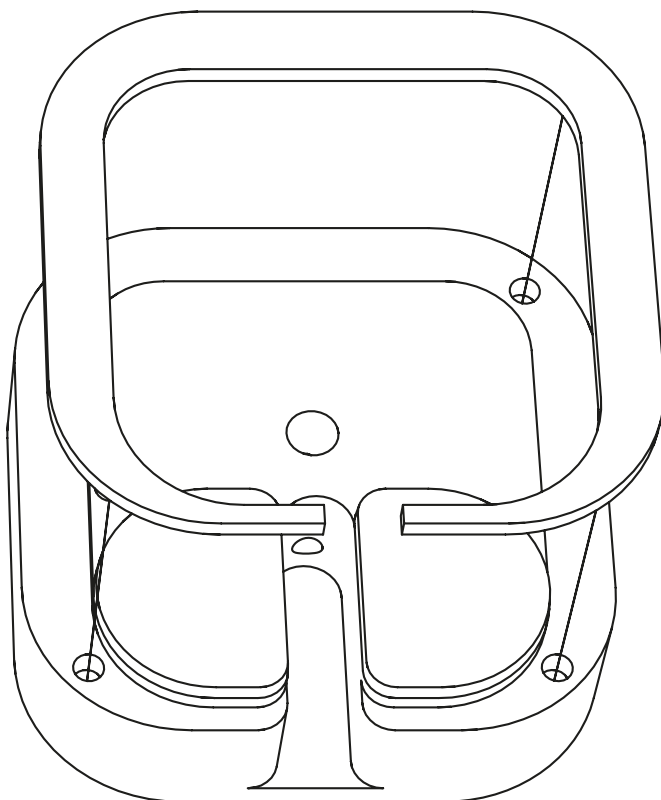

10

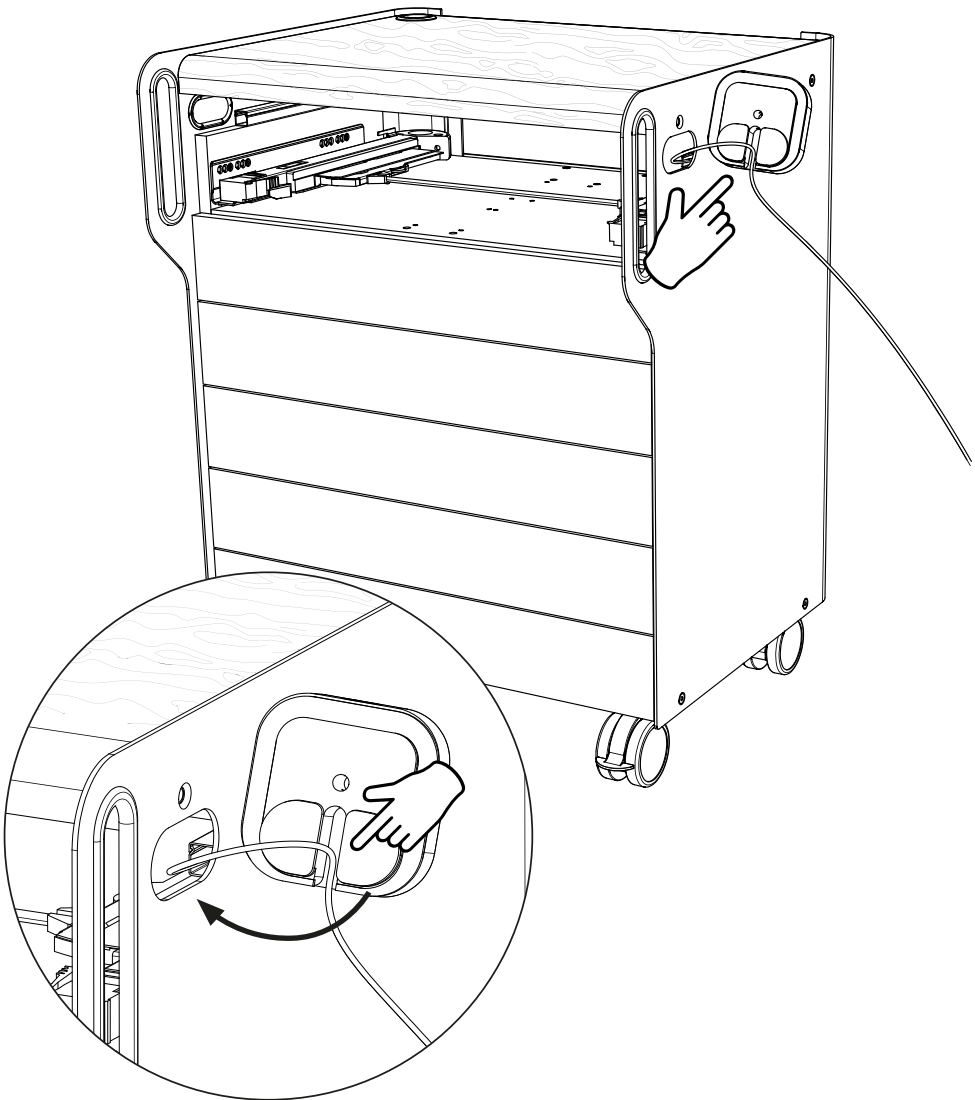


11

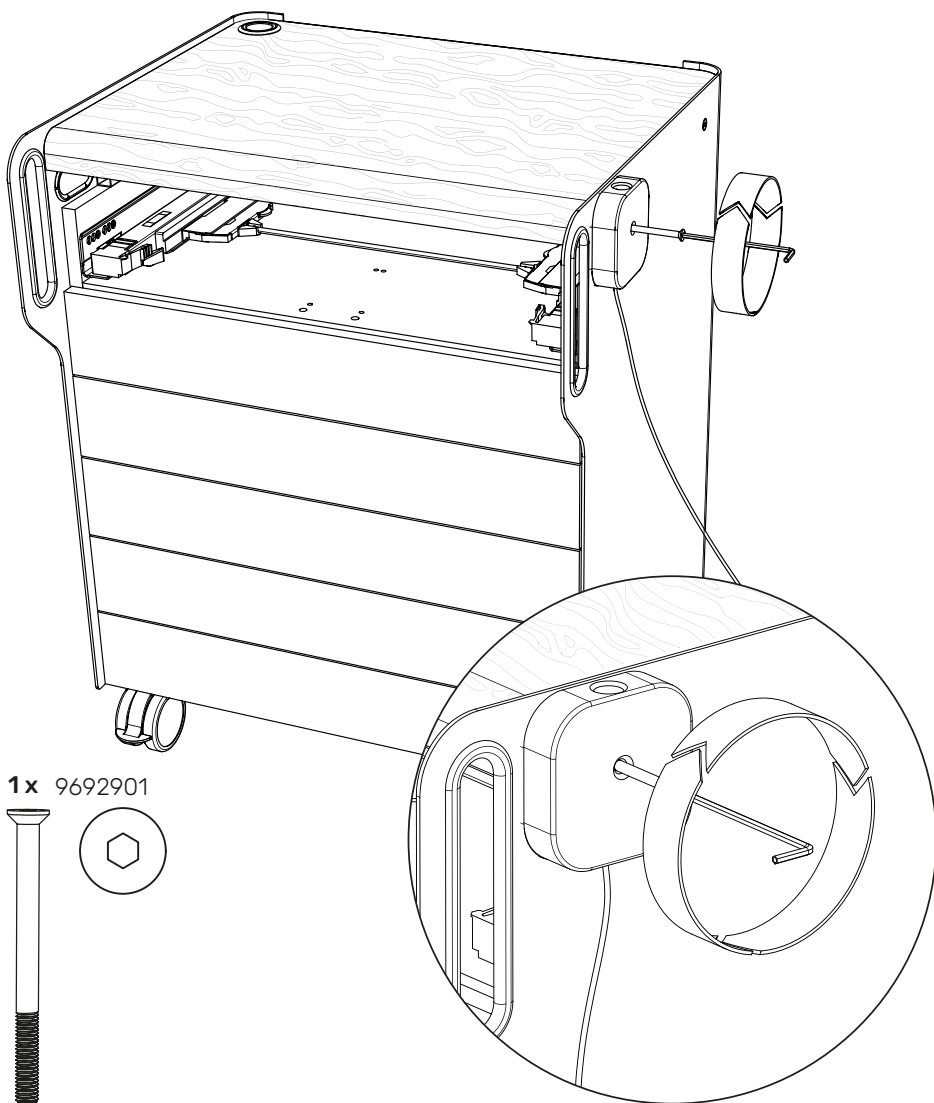

12 a


1205401 | PODOLOG CIRCLE XL classic, BLACK EDITION

1205402 | PODOLOG CIRCLE XL classic, WHITE EDITION

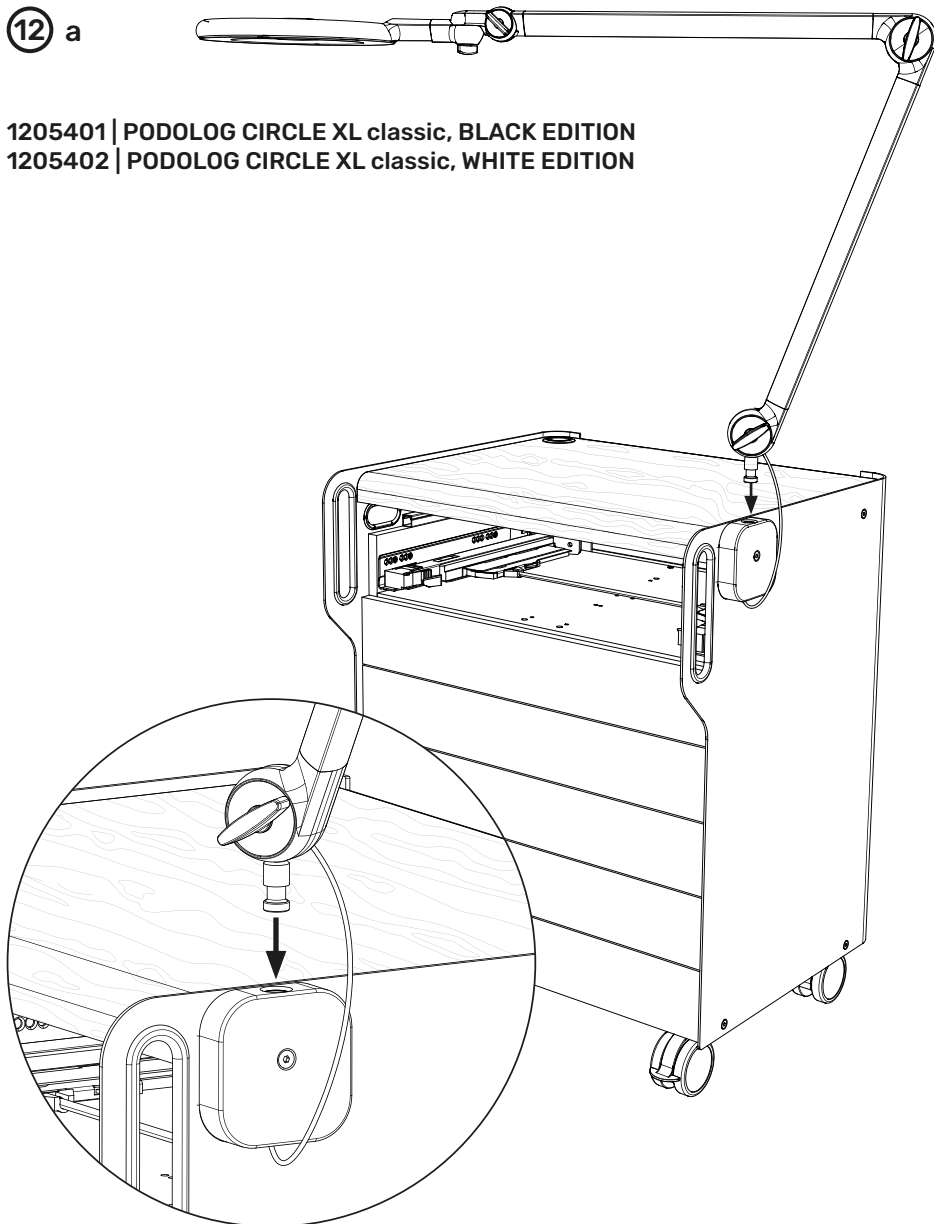


12 b

1200501 | LUX0 magnifier lamp, Circus LED
1207001 | Daylight iQ LED magnifier lamp, white/grey

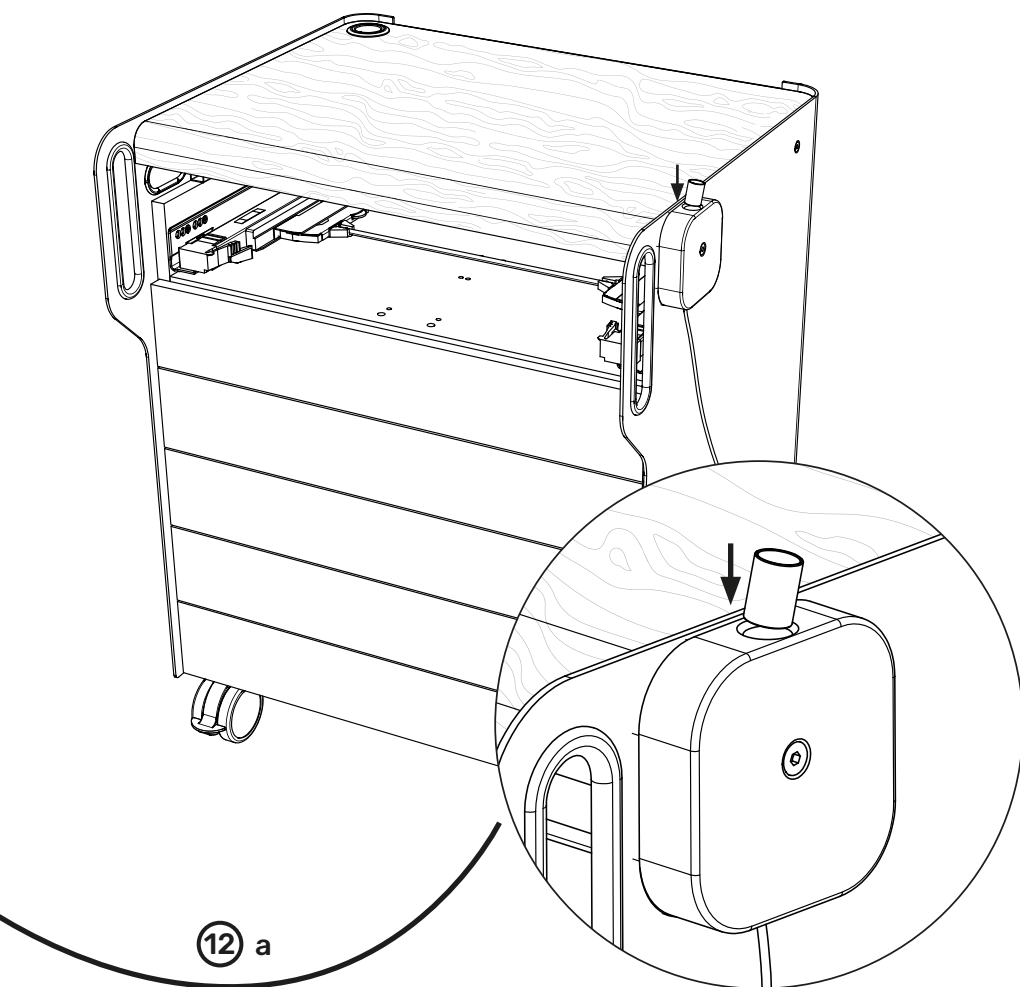


12 a

Matching accessories

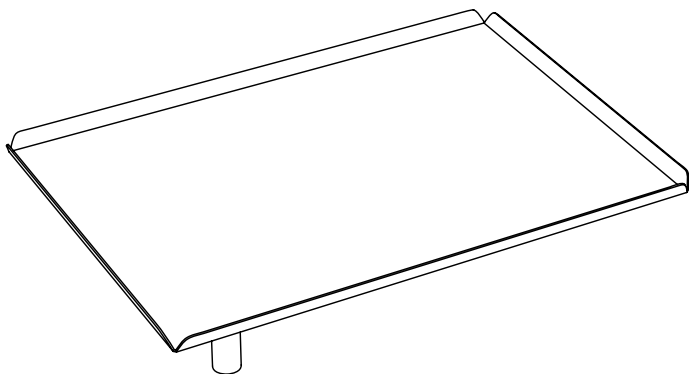

1021501 | Stainless steel instrument tray, swivelling

W/D: 33,5/23,5 cm

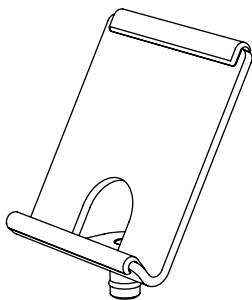

1046601 | pododesk tray holder for RUCK® ROOM furniture



Spare parts

Please contact **RUCK SERVICE** for spare parts.

Telephone +49 (0)7082. 944 22 55

Fax +49 (0)7082. 944 22 59

E-mail service@hellmut-ruck.de

Disposal



Environmental hazard!

Incorrect disposal endangers our environment



The RUCK® Connector Set for RUCK® ROOM light/move must be disposed of through available return and collection systems at the end of its service life!

Warranty

The product comes with a 2-year warranty. Normal wear of surfaces, castors, etc., and other moving parts is excluded from the warranty. Traces of use and signs of wear and tear due to age and use, which are based on normal use corresponding to the performance values and the nature of the RUCK® Connector Set for RUCK® ROOM light/move, are in accordance with the contract and are not defects in the legal sense.

The warranty runs from the date of purchase when the product was first bought. The date of purchase must be confirmed by the sales receipt. Within the scope of the warranty, HELLMUT RUCK GmbH will, at no charge, either repair or replace the defective products – at RUCK's discretion. The prerequisite is carriage-paid shipment of the defective product together with the purchase receipt. The local agent is responsible for claims made outside of Germany. In case of doubt, please check with RUCK before returning the device.

The warranty becomes null and void if we find that the problem was caused by improper or incorrect installation/assembly or usage, by non-observance of the instructions for use, by external intervention or as a result of a non-authorized repair or modification.

The warranty is limited to repair or replacement of the product. Further liability (particularly loss of revenue or earnings) is excluded. If however, it turns out that it is a problem that is not covered by the terms of the warranty or that the period of the guarantee has elapsed, any costs for inspection and repair must be borne by the customer.

We reserve the right to make changes to and deviations from the technical design.

8085502 | Instructions for Use RUCK® Connector Set | REV 03 |
Revision status 26.04.2023



HELLMUT RUCK GmbH
Daimlerstraße 23
DE-75305 Neuenbürg
fon +49 (0)7082 944 20
fax +49 (0)7082 944 22 22
kontakt@hellmut-ruck.de
hellmut-ruck.de

